



TYPISCHE KUNDEN:

Psychologen, Psychiater und Ärzte in der öffentlichen Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie, Privatkliniken und Forschung.

VORTEILE:

Für den Patienten

- Schneller Zugriff auf Bewertung
- Erhöhtes Selbstbewusstsein
- Höhere Präzision bei der Diagnose

Für der Kliniker

- Wichtige objektive Zusatzinformationen
- Effektives Kommunikationstool
- Zugänglichkeit des Tests

Für die Klinik

- Weniger Besuche
- Schneller Bewertungsprozess
- Kürzere Warteschlangen

Für die Gesellschaft


- Das Geschäftsmodell ermöglicht auch kleinen Kliniken den Zugang zu anspruchsvollen Tests
- Kosteneffizient
- Weniger Zeitverlust und höhere Lebensqualität für die Angehörigen

TESTEN SIE SELBST:

Suchen Sie im App Store nach „CPTA“ und laden Sie es kostenlos herunter (nur iOS Geräte).

KOSTEN

OPATUS® CPTA ist Pay-per-Use. Weitere Kosten werden nicht in Rechnung gestellt. Wird monatlich im Nachhinein in Rechnung gestellt.

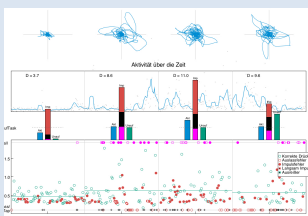

Opatus möchte die Lebensqualität von Menschen mit Aufmerksamkeitsprobleme durch verbesserte, Smartphone-basierte Diagnoseunterstützung und Behandlungsnachsorge verbessern.

Der Test

OPATUS® CPTA ist ein objektiver Test, der gleichzeitig die anhaltende Aufmerksamkeit, Impulsivität und motorische Aktivität einer Person misst. Der Test dauert je nach Alter der Person 8-20 Minuten.

Die Quantifizierung der Aufmerksamkeit kann in vielen Situationen wünschenswert sein. Geistesschwäche, ADHS und die Parkinson-Krankheit sind einige Beispiele, bei denen dies wichtig sein kann. OPATUS® CPTA sollte ursprünglich als objektive Ergänzung zur klinischen Beurteilung bei ADHS-Untersuchungen eingesetzt werden. Die Ergebnisse des einzelnen Patienten werden mit den Ergebnissen einer Referenzgruppe verglichen, die hauptsächlich in Schweden und Deutschland gesammelt wurde.

Ausrüstung

OPATUS® CPTA läuft auf iOS-Geräten wie Standard-iPhones oder iPods. Wenn keine Registrierung der motorischen Aktivität erforderlich ist, können auch iPads verwendet werden. Die getestete Person muss auf einem handelsüblichen Esszimmerstuhl sitzen, also einem stabilen Stuhl ohne Armlehne, Neigung oder Drehbarkeit. Die Stuhlgröße muss an die Person angepasst sein.

Die Aufgabe

Es handelt sich um eine standardisierte Aufgabe, bei der Symbole kurz und in gleichmäßigem Tempo auf dem Smartphone-Bildschirm angezeigt werden. Einige Symbole (Ziele) erfordern eine Reaktion (Tippen auf den Bildschirm), andere nicht (Nichtziele). Varianten dieser Aufgabe werden seit den 60er Jahren verwendet und sind als CPT (Continuous Performance Test) bekannt. Wie lange kann eine Person ihre Aufmerksamkeit bei einer Aufgabe mit geringer Stimulation aufrechterhalten? Es ist ein Härte-test!

Testvarianten

Je nach Alter variiert die Testeinstellung gemäß der folgenden Tabelle.

	Alter	Minuten	CPT typ	Ziele %
Kleinkind	Bis 6	8	Go/NoGo	50
Kind	6 – 12	16	Go/NoGo	50
Jugendliche	12 - 18	20	X-1	20
Erwachsene	18 - 60	20	X-1	20/80
Senior	60+	20	AX	30

Report

Der Bericht ist detailliert, aber dennoch leicht verständlich und ein hervorragendes Kommunikationsmittel gegenüber Patienten und Erziehungsberechtigten. Das grafische Ergebnis zeigt die Fähigkeit zur anhaltenden Aufmerksamkeit, d. h. die Leistung über einen längeren Zeitraum, und bietet dem Prüfer eine wertvolle objektive Ergänzung zur klinischen Beurteilung.

Mithilfe einer online Smartphone-Plattform ist die gesamte Beurteilung immer verfügbar und kann außerhalb der Klinik (in der Schule, im Gesundheitszentrum, in der forensischen Klinik usw.) getestet werden).

Mehr Informationen

+46 708 881491

info@opatus.se